


生物显微镜 ML41

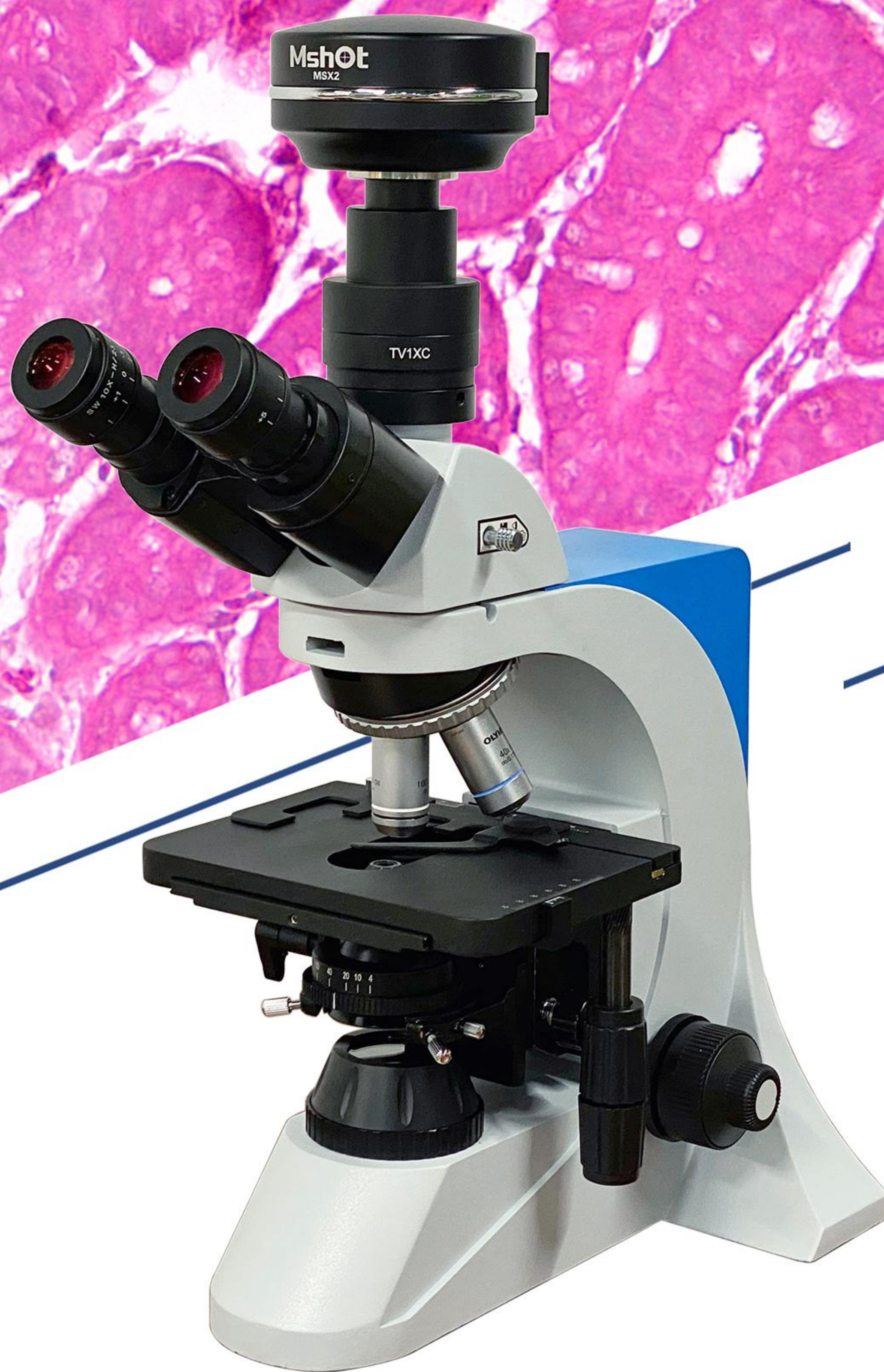


生物显微镜ML41

主要用于观察生物组织切片或微生物染色片等。采用无限远光学系统，显微镜总体放大倍数为40x-1000x。光源加入双色温调控功能，可一键切换冷光、暖光等不同色温，满足不同客户对不同色温的需求。

特点：

- 双色温光源设计
- 摇出式聚光镜，成像清晰
- 4x、10x、40x、100x，高透过率成像物镜
- 大视野高眼点目镜，视场数最大可达23mm，所有目镜屈光度可调
- 可拆卸式双层机械移动工作台设计，精度可达0.1mm，便于电动载物台升级

拍摄图

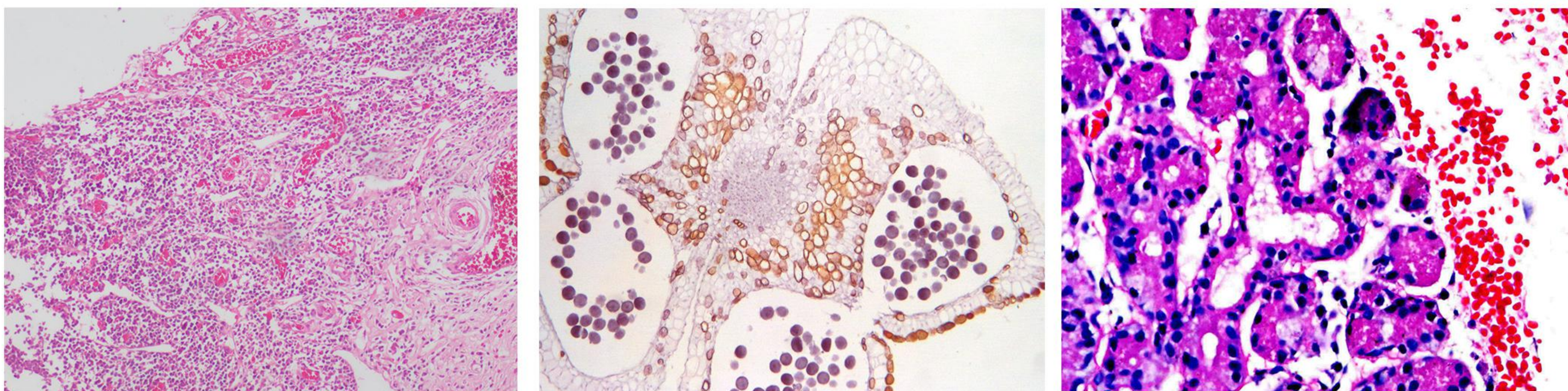

技术参数

目镜筒	30° 铰链式三目头，百分百分光，30° 倾斜，瞳距调节50-75mm
目镜	大视野WF10X /F. N. 23
物镜	平场半复物镜A-Plan 4X/0.12；WD:11.6mm
	平场半复物镜A-Plan 10X/0.25；WD:10mm
	平场半复物镜A-Plan 40X/0.65；WD:0.55mm
	平场半复物镜A-Plan 100X/1.25；WD:0.17mm
	平场半复物镜A-Plan 20X/0.45；WD：2.9mm(选配)
	平场半复荧光物镜 M-UPLFLN 100X/1.30；WD：0.15mm(选配)
调焦机构	同轴式粗微动调焦机构，调焦范围:25mm，微动格值:0.002mm
物镜转换器	内向式五孔转换器
载物台	可拆卸式双层机械移动工作台，载物台尺寸:185mm×145mm
	移动范围：75(X)mm×50(Y)mm，精度：0.1mm
透射照明系统	摇出式聚光镜 NA1.2/0.22
	双色温LED光源，暖色/冷色 色温自由切换，亮度可调